

Tecnología Innovadora
Para tratamientos de medicina estética

Del sueño a la realidad
con nuestra tecnología
al alcance de tus manos



Clearlight LD808™

BELIUM
MEDICAL

Clearlight™ LD808



Para **Usuario**

- Tratamiento efectivo
- Solución superior para la eliminación de vello
- Ahorra tiempo y esfuerzo
- Convenientes programas de diseño y tratamiento

Para **Especialista**

- Menor costo de mantenimiento y largo ciclo de vida del equipo
- Ahorro de tiempo gracias al pulso de alta potencia y el tamaño de punto más grande

Para **Paciente**

- Tratamiento sin anestesia
- Menos dolor gracias a la tecnología de pulso de enfriamiento especializada
- Evita quemaduras
- Excelentes resultados

Clearlight facilita la depilación profesional y la hace más eficiente.

✓ Pulso de Alta Potencia y Sistema Láser Diodo CW Alta Potencia

Clearlight LD808 está diseñado para un tratamiento más eficiente en la eliminación de vello. La tecnología de pulso de alta potencia realiza un rápido y efectivo tratamiento, las ondas continuas conllevan a un tratamiento seguro con el sistema de enfriamiento Chiller-tip.

✓ Tecnología de Pulso Avanzada

El modo HRS incluye funciones especializadas de 4 pulsos, ayuda a reducir el dolor y mejora el efecto del tratamiento.




✓ Profundidad de Penetración

✓ Tratamiento de alta velocidad


Las rápidas tasas de repetición mejoran las habilidades de práctica del usuario.

- Modo HRS: hasta 3 Hz
- Modo HRM: hasta 15 Hz
- Modo STM: hasta 10 Hz

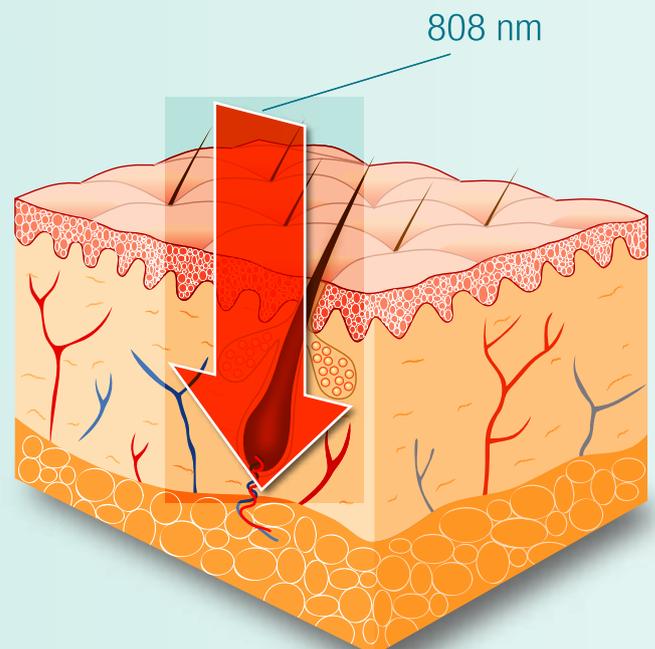

Tecnología láser diodo de 808 nm para la eliminación de vello.

- Reducción permanente de vello
- Para todo tipo de piel y texturas
- Incluye tratamiento de estiramiento de piel

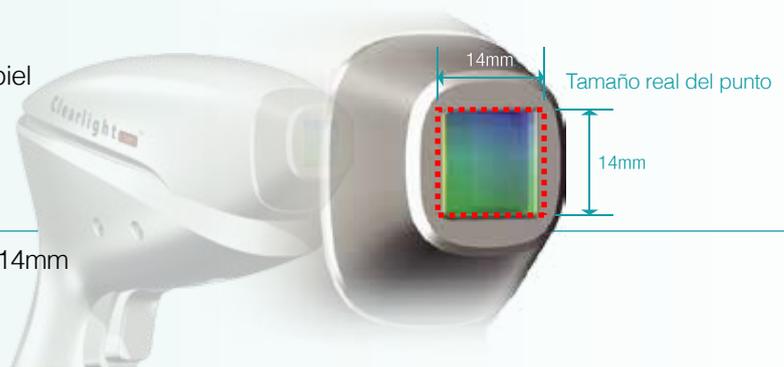

Tamaño grande de disparo

- Tamaño del punto mejorado a 14mm x 14mm
- Reduce tiempo del tratamiento

Chiller-tip Sistema de enfriamiento por contacto

- Mayor seguridad y protección de la capa epidérmica
- Rápido enfriamiento
- Mantiene estable la temperatura de enfriamiento

Interfaz fácil de usar



3 principales programas de tratamiento

- Modo Disparo para Depilación (HRS)
- Modo Movimiento para Depilación (HRM)
- Modo Movimiento para Tratamiento de la Piel (STM)

Para todo tipo y textura de piel

ClearlightTM LD808

Solución probada para todas las aplicaciones de eliminación de vello.

El sistema más estandarizado de depilación con láser diodo.



Especificaciones Técnicas

Tipo de láser	Matriz de diodos (onda continua)
Longitud de onda	808nm
Fluencia	1 ~ 120 J/cm ²
Duración del pulso	800 ms (max)
Tamaño de punto	14 mm x 14 mm
Tasa de repetición	<ul style="list-style-type: none">• Modo HRS: hasta 3 Hz• Modo HRM: hasta 15 Hz• Modo STM: hasta 15 Hz
Enfriamiento	Contact Cooling System
Panel	Pantalla táctil LCD de 10.2 pulgadas
Dimensiones (AxPxH mm)	388 x 610 x 1,212
Peso	55 Kg (121 lbs)



DISTRIBUIDOR OFICIAL
Avda. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón 985 30 12 34
info@belium.es · www.beliummedical.es