

Clearlight™

Sistema IPL optimizado

**Del sueño a la realidad con nuestra
tecnología que hace los tratamientos
más fáciles y eficientes**


CE
1023



- ✓ **Acné**
- ✓ **Lesiones pigmentarias**
- ✓ **Lesiones vasculares**
- ✓ **Melasma**
- ✓ **Depilación**
- ✓ **Aumento de la producción de colágeno**
- ✓ **Rejuvenecimiento de la piel**

Clearlight es un sistema de IPL (Intense Pulse Light) potente y versátil

La Luz Pulsada Intensa permite tratar diferentes aplicaciones dermatológicas y estéticas, lesiones vasculares, pigmentarias, depilación y estimulación de colágeno. La terapia foto lumínica concentrada mejora el colágeno, la producción de elastina y sobre todo, rejuvenece la piel.

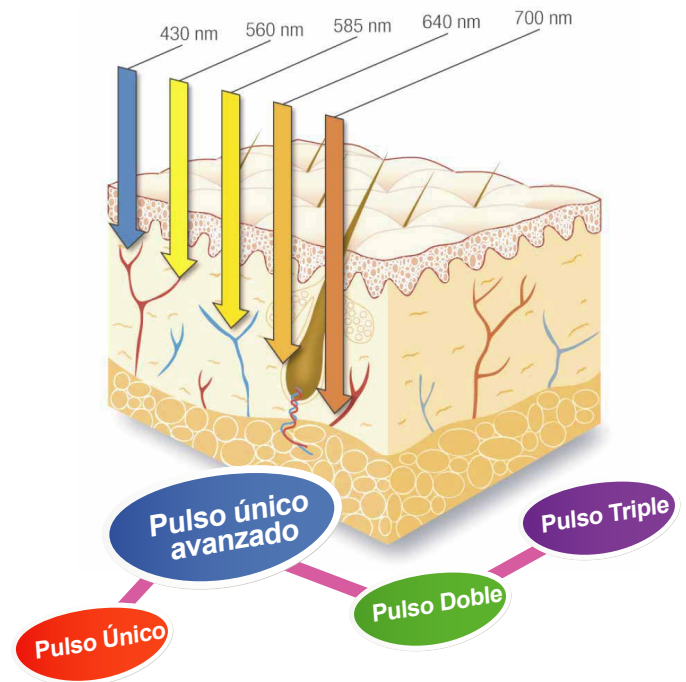

Sus múltiples filtros permiten cambiar la longitud de onda para un tratamiento más específico. Esto combinado a los sus pulsos dobles, triples y toning hacen que los resultados sean excelentes. El cabezal refrigerado aporta un tratamiento seguro e indoloro, y su gran tamaño 40x15mm acorta el tiempo de la sesión. El interfaz amigable e intuitivo hacen que Clearlight sea uno de los equipos más utilizados en las clínicas.

ESPECIFICACIONES

Light Source	Intense Pulse Light (Xenon Lamp)
Spectrum (Wave length)	430 nm - 1200 nm
Energy Density (Fluence)	5 - 30 J/cm ²
Pulse Duration	5 - 50 ms
Pulse Delay	0 - 90 ms
Repetition Rate	Up to 1 Hz
Type of Pulse	Single, Double, Triple and Toning Pulses
Spot Size	15mm x 40mm
Cooling	maximum - 15°C
Panel	8 Inch, LCD Touch Screen
Dimension (WxDxH mm)	310 x 590 x 1220
Weight	55 Kg

