

ULTRA

BEAUJET

SISTEMA REMODELACIÓN DÉRMICA
ENERGÍA MICROJET






Ultra Beaujet es una revolucionaria tecnología de remodelación dérmica que utiliza energía de alta presión para ofrecer soluciones que mejoran la piel profundamente en la dermis. Esta tecnología crea una microlesión y distribuye lateralmente soluciones activas en la dermis profunda para inducir la regeneración del colágeno y una rápida curación de la piel consiguiendo una mejora estética duradera. Ultra-BEAUJET ofrece resultados seguros para todo tipo de piel con bajo riesgo de PIH.



Los principios activos se dispersan lateralmente en la dermis para promover la síntesis de colágeno



Aumento del engrosamiento de la epidermis lo que da una mejora visible

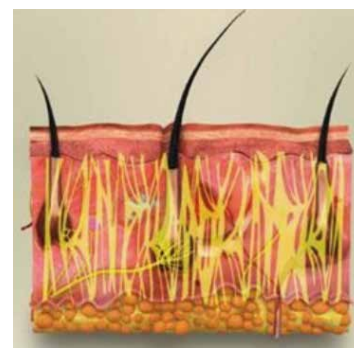

La cicatrización natural comienza a promover el rejuvenecimiento de la piel.

ESPECIFICACIONES

Entrada:	100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía:	750 VA
Nivel de presión:	1 – 20 niveles (125-600kPa \pm 10%)
Nivel de llenado:	1-10 nivel
Rango de aplicación:	20 disparos / min \pm 3 disparos
Compresor (tiempo de carga) :	45 segundos \pm 10%
Capacidad del tanque del compresor de aire:	6L \pm 5%
Compresor aire tiempo de carga en funcionamiento:	9 segundos \pm 10%
Dimension:	395,2 (ancho) x 675,2 (profundidad) x 989 (alto)mm
Peso:	49 kg. aplicador 1,1 kg aprox.