




# JANUS Pro


Sunlike

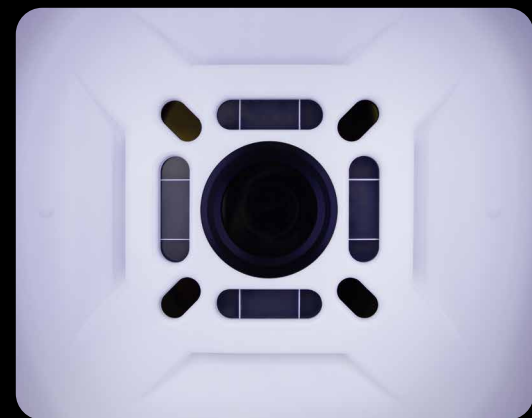

Fuente de luz: LED(SunLike) + UV LED(385nm)


Especificaciones de la cámara: Canon EOS 200D II 24.1 megapixels

Tamaño de imagen: 4000 x 6000px (8000 x 12000px)

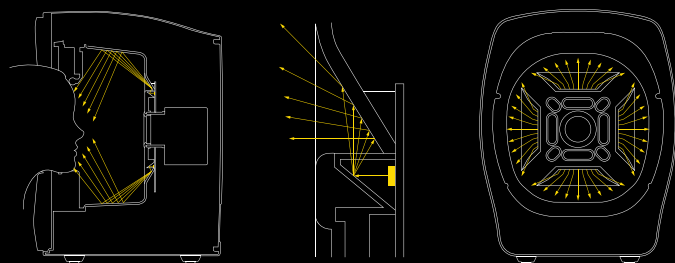

Patent Application Number: 10-2020-0168226

4 fuentes de luz

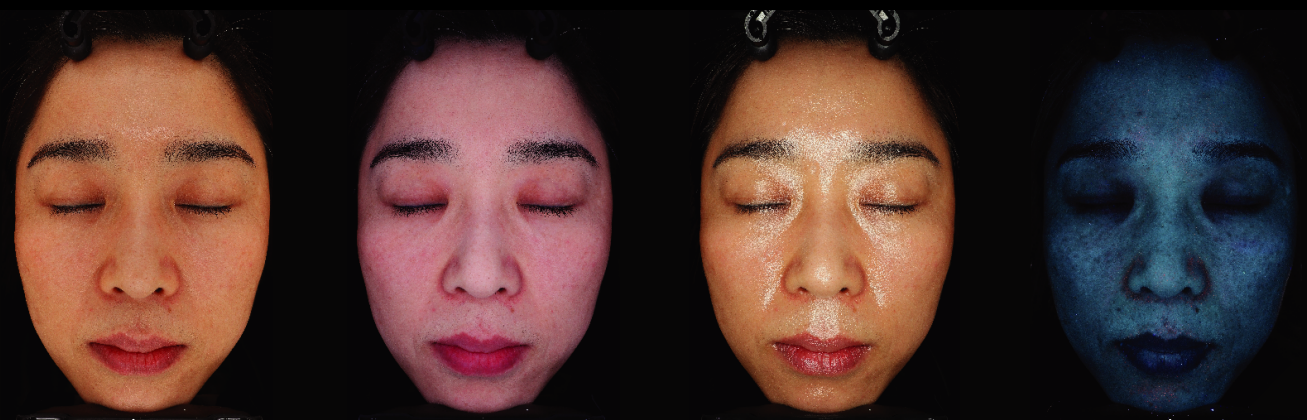

Luz normal

Poros / Tono de piel

Luz polarizada cruzada

Pigmentación / Rojeces / Cicatrices

Luz polarizada paralela

Arrugas / Elasticidad / Textura de la piel

Luz UV

Manchas / Sebo / Popirina

## Países en venta



## Colaboradores




JANUS ha suministrado al instituto de investigación empresarial más grande de Corea, agencia de evaluación clínica, dermatología, empresas de cosmética, cirujanos estéticos, etc.

## Certificaciones



## Dimensiones

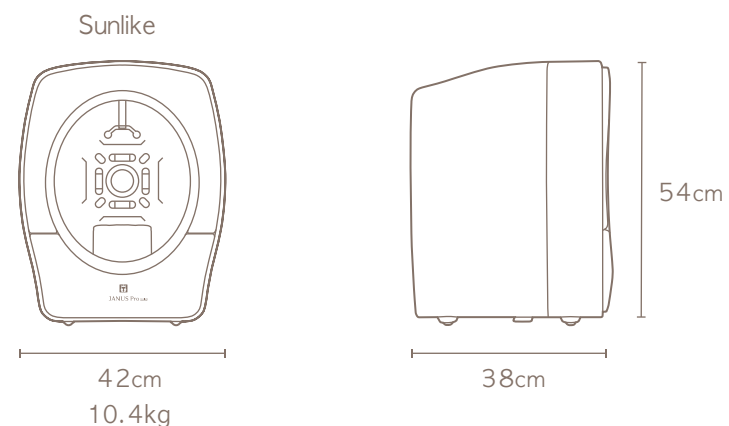

**BELIUM**  
MEDICAL

Avda. Dionisio Cifuentes 34 · 33203 Gijón

985 30 12 34

info@belium.es

www.beliummedical.es



# JANUS Pro

Sistema Profesional de Análisis Facial



Sunlike



**BELIUM**  
MEDICAL



# JANUS Pro ahora más potente


## Autoesterilización para la seguridad de todas

Mantenga un 99,9 % de limpieza de dos modos: esterilización permanente (UV-A) esterilización concentrada (UV-C) para garantizar la seguridad contra virus y gérmenes. (Esta función de esterilización utiliza la tecnología 'Violeds').



## LED ultravioleta de 385 nm


Las longitudes de onda casi visibles minimizan la irritación de la piel. Muestra sebo, popyrina y pigmentación con mayor claridad y precisión.

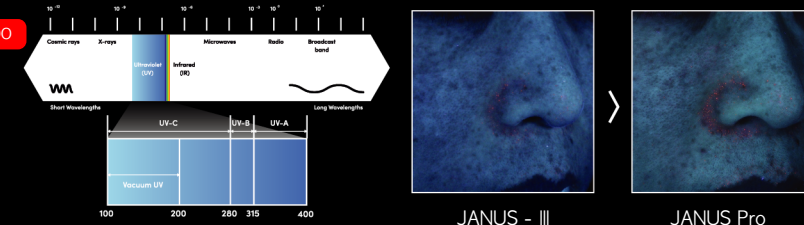

## Flash de xenón / SunLike LED

El sol expresa mejor el color de un objeto. La calidad del color depende de la luz reflejada por el sol. SunLike LED con un CRI 95.

Por primera vez en la industria tenemos el flash de xenón es considerado lo más parecido a la luz solar con un CRI entre 96 y 100 y el LED Sunlike con un CRI de 95.

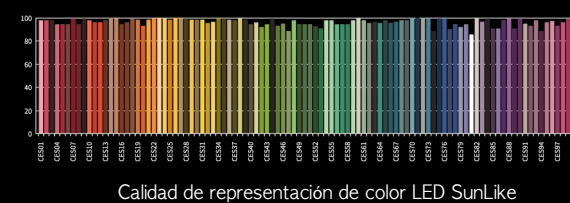

## Tablet (opcional)

Si dispone de un espacio reducido com para instalar un PC, existe la posibilidad de acoplar una tablet. Disponga del 100% del espacio de su consulta utilizando una tablet y su soporte




## Cubierta fácil de almacenar

Bloquea perfectamente luz indeseada durante la sesión, es higiénica, repele el polvo y es impermeable.

## Voz IA

Por primera vez en la familia JANUS implementamos una voz de inteligencia artificial para que el uso sea más cómodo para nuestros clientes.

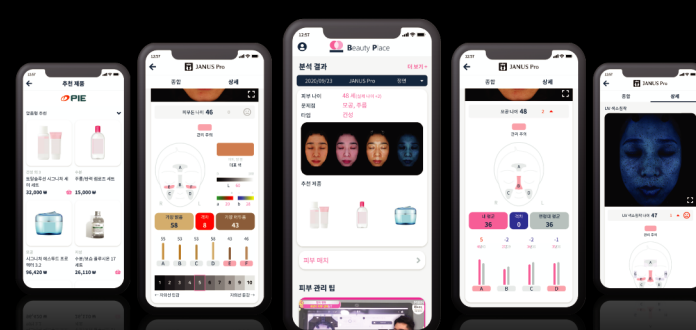


## Beauty Place (app móvil)

Envía resultados de análisis a la app "Beauty Place" y reciba productos recomendados (iOS y android)

# Alta fiabilidad, Sistemas de Análisis Diferenciados

## 13 análisis diferentes

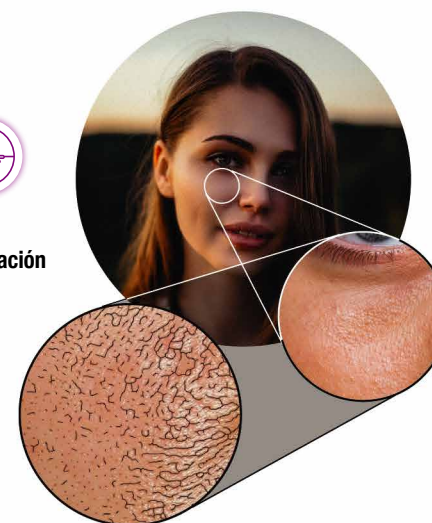

## Análisis Comparativo

Contamos con una tecnología única, que al hacer varios análisis a un mismo paciente, mantienen las mismas condiciones, posibilitando un análisis comparativo casi perfecto.



Rango de error: ± 2%

Dispositivo de retención de brillo

Facial sofisticado, tecnología de reconocimiento automático PFR-2

Área de análisis ergonómico

## Imágenes originales de alta definición

El tamaño de la imagen original determina la calidad del análisis. Sunlike: 24,1 megapíxeles (resolución máxima 8000x12000px)




A	JANUS Pro Sunlike	4000
B	JANUS Pro Sunlike	6000

## Big Data/Actualizaciones automáticas

Recopilamos big data extrayendo datos de edad por país. Los datos recopilados mantienen una seguridad completa con su propia tecnología de mantenimiento de seguridad. (Registro de Patente No. 10-2091388)

## Líder en análisis de imágenes



Mide la elasticidad de la piel sin contacto. (El método de contacto se mide según el grado de presión sobre la piel, por lo que la desviación por región es muy grande e imprecisa). Puede ver la superficie de la piel en una pantalla 3D.

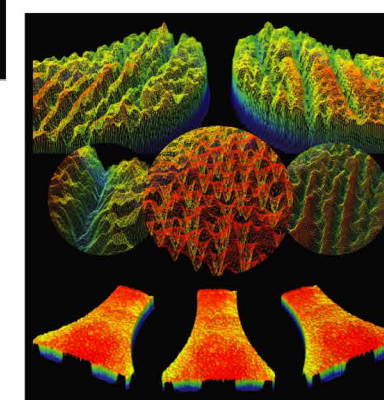

# Así es como Janus Pro funciona



## Program Operating Order

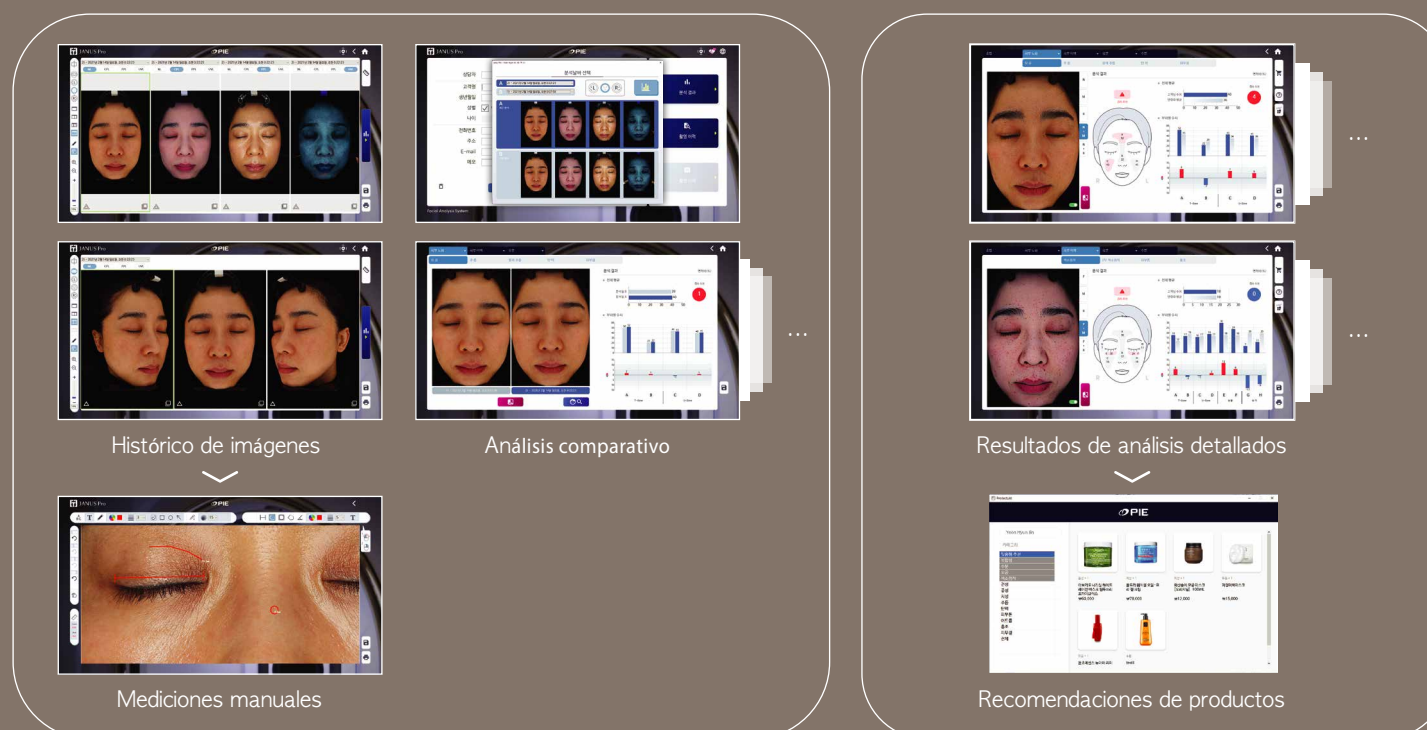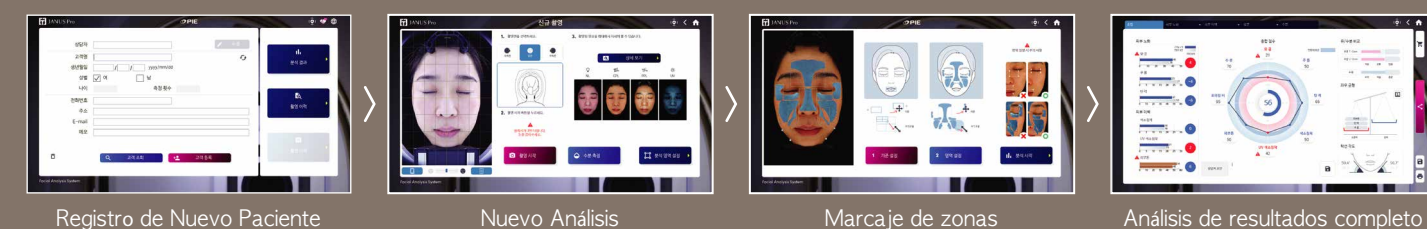

## JANUS Pro Pasado, presente y futuro

